


Стіл перев'язувальний КП

ДАТА ФОРМУВАННЯ 12.09.2026 р.

Вартість: 9200 грн

Артикул: F0232

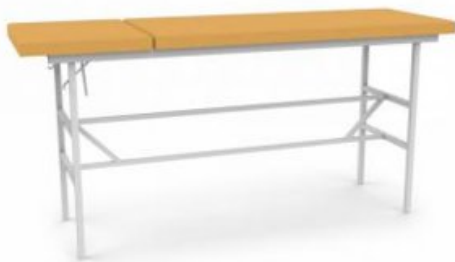

Стіл (кушетка) перев'язувальний АТОН КП призначений для комфортного розміщення пацієнтів під час перев'язок, оглядів та медичних маніпуляцій у процедурних і перев'язувальних кабінетах

<p data-start="0" data-end="445">Стіл (кушетка) перев'язувальний медичний АТОН КП призначений комфортного та безпечного розміщення пацієнтів під час проведення перев'язок, оглядів, маніпуляцій і лікувальних процедур у медичних закладах різного профілю. Модель використовується у перев'язувальних, процедурних кабінетах, стаціонарах, амбулаторіях та приватних клініках, де важливі зручність пацієнта, надійність конструкції та відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

<p data-start="447" data-end="778">Конструкція столу виконана у вигляді двосекційного ложа, що складається з сидіння та підголівника, обтягнутих зносостійкою вінілштучною шкірою. Оббивний матеріал приємний на дотик, легко очищується та стійкий до регулярної дезінфекції, що робить кушетку придатною для щоденного інтенсивного використання в умовах медичного закладу.

<p data-start="780" data-end="1072">Підголівник має механічне безступінчасте регулювання встановлюватися у горизонтальному положенні або фіксуватися під кутом нахилу в діапазоні 15°–60°, що дозволяє адаптувати положення пацієнта під конкретну процедуру та забезпечити додатковий комфорт під час тривалих маніпуляцій.

<p data-start="1074" data-end="1373">Сидіння та підголівник встановлені на посилений металевий каркас полімерним покриттям з антибактеріальними властивостями. Покриття стійке до впливу мийних і дезінфекційних засобів, механічних навантажень та вологи, що забезпечує тривалий строк служби виробу та збереження його зовнішнього вигляду.

<p data-start="1375" data-end="1595">Стіл встановлюється на стаціонарні ніжки, що гарантує стійкість конструкції під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження становить 120 кг, що відповідає вимогам до медичних кушеток загального призначення.

<p data-start="1597" data-end="1883">Габаритні розміри виробу складають: довжина 1890 мм, ширина 600 мм, висота сидіння 400 мм. Товщина ложа — 40 мм, що забезпечує оптимальний баланс між комфортом та жорсткістю поверхні. Вага кушетки — 27 кг, що дозволяє при необхідності змінювати її розташування у приміщенні.

<p data-start="1885" data-end="2102">Всі матеріали та комплектуючі, використані у конструкції перев'язувального АТОН КП, мають необхідні висновки та допущені до застосування у виробництві медичних меблів відповідно до чинного законодавства України.

<p data-start="2104" data-end="2253">Гарантійний термін експлуатації становить 18 місяців, а строк служби — не менше 60 місяців, що підтверджує надійність і довговічність виробу.

<p data-start="2255" data-end="2491" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Стіл (кушетка) перев'язувальний АТ зручним і функціональним рішенням для оснащення перев'язувальних і процедурних кабінетів, поєднуючи ергономіку, простоту догляду та відповідність сучасним вимогам до медичних меблів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал каркаса Сталь з полімерним покриттямРозміри товару 1890 x 600 x 910 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Стіл перев'язувальний КП - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.